

Ходунки для инвалидов и пожилых людей DSTRANA



**Ходунки шагающие
Арт. 9122**


**Ходунки двухуровневые
Арт. 9123**

**Ходунки складные со съёмными колесами
Арт. 9124**

**Ходунки роллаторы
Арт. 9121**

Материал	Ходунки изготовлены из нержавеющей стали			
Диапазон высоты	74-84 см	74-84 см	74-84 см	78-88 см
Ширина/глубина	53x45 см	53x45 см	53x45 см	60x49 см
Вес	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг	7,5 кг
Максим. нагрузка	120	120	120	150
Шагающий режим*	да	да	да	нет
Запасные наконечники	да	да	да	нет

* Шагающий режим - попеременное передвижение левой и правой рам ходунков. Для перехода в шагающий режим необходимо переключить фиксатор рам, обеспечив их свободу относительно поперечных связей. При зафиксированных рамах ходунки переставляются пользователем по ходу движения.

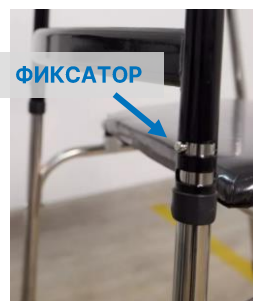

ОСОБЕННОСТИ ДВУХУРОВНЕВЫХ ХОДУНКОВ (АРТ. 9123)

- Нижние поручни двухуровневых ходунков предназначены для положения «сидя» - они помогают вставать с кровати, стула. Верхний уровень поручней используется стоя и при ходьбе.

ОСОБЕННОСТИ ХОДУНКОВ-РОЛЛАТОРОВ (АРТ. 9121)

- Стояночный тормоз: ручные тормоза роллаторов имеют фиксирующую функцию. Для торможения ручки нужно потянуть вверх. Для фиксации ходунков в неподвижном положении - потянуть вниз.
- Оснащены сиденьем для отдыха и опорой под спину, дополнительно имеют корзину для перевозки вещей.

ОСОБЕННОСТИ СКЛАДНЫХ ХОДУНКОВ СО СЪЕМНЫМИ КОЛЕСАМИ (АРТ. 9124)

- Ходунки арт. 8395 дают возможность выбирать оснащение передних стоек в зависимости от ситуации и предпочтений пользователя. Здесь можно разместить либо колеса, либо стандартные опоры с резиновыми наконечниками.
- Конструкцией предусмотрено сиденье для отдыха.
- Мягкие прорезиненные ручки.



<https://clck.ru/3AEWap>



Посмотреть на сайте

